

Gebrauchsinformation / Instruction for use

Werolin® Wundreinigungsspray

MEDIZINPRODUKT / MEDICAL DEVICE

DE

Werolin® Wundreinigungsspray ist ein Spray zur Reinigung, Befeuchtung und Heilung von akuten Wunden.

Eigenschaften:

Werolin® Wundreinigungsspray dient zur Reinigung und Befeuchtung von akuten Wunden und unterstützt die Wundheilung [Vorbeugung von Infektionen durch erniedrigten pH-Wert].

- ✔ **Reinigung von akuten Wunden, z.B. Schürf-, Riss- und Schnittwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades**
- ✔ **Dekontamination von akuten Wunden**
- ✔ **Reduziert die Schwellung**
- ✔ **Reduziert die Blutung**
- ✔ **Fördert die Wundheilung**
- ✔ **Verhindert Infektionen**
- ✔ **Optimierung des Milieus [pH-Wert]**
- ✔ **Schmerzfremde Wundreinigung**
- ✔ **Löst Verkrustungen ab**
- ✔ **Für Kinder geeignet**
- ✔ **Beugt Narbenbildung vor***

* wenn das Wundgebiet mit einem Verband abgedeckt und mit **Werolin® Wundreinigungsspray** feucht gehalten wird, bis die Wunde geschlossen ist.

Indikation:

Zur Akut- und Erstversorgung bei kleinen, offenen Verletzungen (z.B. Schnitt-, Schürf-, Risswunden) und Verbrennungen 1. und 2. Grades.

Anwendung:

Wunde mit **Werolin® Wundreinigungsspray** reinigen. Direkt auf das Wundgebiet sprühen und bei Bedarf mehrmals wiederholen. **Werolin® Wundreinigungsspray** kann in Verbindung mit einem handelsüblichen Verbandstoff angewendet werden. Wenn möglich, Wundgebiet mit Verband abdecken und mit **Werolin® Wundreinigungsspray** feucht halten, bis die Wunde geschlossen ist. Darauf achten, dass der Verband nicht mit der Wunde verklebt. Wir empfehlen die Weiterbehandlung ab dem 3. Tag mit **WERO Wund- und Heilsalbe**. Für eine kühlende Wirkung **Werolin® Wundreinigungsspray** im Kühlschrank aufbewahren. Kann auch am Mund- und Schleimhautbereich angewendet werden. Die Überkopfsprayette ermöglicht gleichmäßiges Sprühen aus jeder Position. Für Kinder geeignet. Die Anwendungsdauer richtet sich nach Art und Schwere der Verletzung.

Kontraindikation:

Bei bekannter Allergie oder Verdacht allergischer Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe sollte das Produkt nicht eingesetzt werden. Bei Verbrennungen ab Grad 2b sollte ein Arzt hinzugezogen werden. Die Anwendung bei Schwangeren, Stillenden, Säuglingen und Kleinkindern sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen. Kontakt mit Knorpelgewebe vermeiden. Nicht verwenden in Kombination mit anionischen Tensiden. Silberhaltige Verbandstoffe nicht mit **Werolin® Wundreinigungsspray** befeuchten.

Gewebeverträglichkeit und Biokompatibilität:

Werolin® Wundreinigungsspray enthält keine hautreizenden Substanzen. Es ist nicht irritierend; nicht sensibilisierend.

Sicherheitshinweise:

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht einnehmen. Auf hygienische Entnahme achten. Nach Gebrauch verschließen um Verunreinigung zu vermeiden. Ist die Flaschenöffnung mit der Wunde in Kontakt gekommen oder anderweitig verunreinigt, ist die Flasche umgehend zu entsorgen. Vor Kindern sicher aufbewahren. Temperaturbegrenzung beachten. Gebrauchsanweisung beachten. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Nur einwandfreie und unbeschädigte Gebinde verwenden. Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. Vor Sonnenlicht schützen. Trocken aufbewahren.

Werolin® Wundreinigungsspray is a spray for cleansing, moisturizing and healing of acute wounds.

Characteristics:

Werolin® Wundreinigungsspray is used for cleansing and moisturizing acute wounds and supports wound healing (prevention of infections due to low pH).

- ✓ **Cleansing of acute wounds, e.g. lacerations, abrasions and cuts, 1st and 2nd degree burns**
- ✓ **Decontamination of acute wounds**
- ✓ **Reduction of swelling**
- ✓ **Reduces bleeding**
- ✓ **Supports wound healing**
- ✓ **Prevents infections**
- ✓ **Optimizes the environment on the wound surface (pH-level)**
- ✓ **For the pain-free wound cleansing**
- ✓ **Solves wound crusts**
- ✓ **Suitable also for children**
- ✓ **Prevents scarring***

* if the wound area is covered with a bandage and kept moist with Werolin® Wundreinigungsspray until the wound is closed

Indications:

For acute and initial care for minor, open injuries (e.g. cuts, abrasions, lacerations) and 1st and 2nd degree burns.

Directions for use:

Cleanse wound with **Werolin® Wundreinigungsspray**. Apply directly out of the bottle into the wound and if necessary, repeat several times. **Werolin® Wundreinigungsspray** can be used in combination with customary wound dressings. If possible, cover the wound area with dressing and keep wet **Werolin® Wundreinigungsspray** until the wound is closed. Make sure that the dressing does not stick to the wound. We recommend further treatment with **WERO Wund- und Heilsalbe** from the 3rd day onwards. For a more cooling effect store **Werolin® Wundreinigungsspray** in the refrigerator before application. Can be used on the mouth and on mucous membranes. The overhead spray allows spraying from any position. Suitable also for children. The duration of use is based upon type and severity of the injury.

Contraindication:

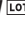

Do not use with hypersensitivity to any of the ingredients. A doctor should be consulted with burns second b or third degrees. Application for pregnant or breastfeeding women, babies and toddlers/ young children should only be carried out with mandatory indication after consultation of a doctor. Avoid contact with cartilage-tissue. Do not use in combination with anionic tensids. Do not moisten dressing materials containing silver with **Werolin® Wundreinigungsspray**.

Tissue tolerance and biocompatibility:

Werolin® Wundreinigungsspray does not contain skin-irritating ingredients. It is non-irritating and nonsensitizing.

General safety instructions:

For external use only. Do not swallow. Look after hygienic extraction. Close bottle after use to avoid contamination. Dispose the bottle immediately after contact of the bottle with the wound or in the case of otherwise contamination. Keep out of the reach of children. Consider temperature. Consider instructions for use. Do not use after expiration date. Do not use damaged packages. Protect from sunlight. Store in a dry area.

Haltbarkeit / Expiration date:	3 Jahre nach Herstellung / 3 years after manufacturing
Aufbrauchsfrist / Time limit to use:	12 Monate nach Anbruch / 12 months after opening
Packungsgröße / packaging size:	75 ml in Kunststoffflasche / 75 ml plastic bottle
Chargenbezeichnung / Batch Code / 	auf Flaschenboden aufgedruckt / printed onto bottom of bottle
Verfalldatum / expiry date / 	auf Flaschenboden aufgedruckt / printed onto bottom of bottle
Zusammensetzung / Ingredients [INCI]:	Aqua purificata, Polyaminopropyl Biguanide, Trace Elements [Zinc, Iron]



REV 052021

Vertrieb durch: WERO GmbH & Co. KG · Idsteiner Str. 94 · D-65232 Taunusstein
 Telefon +49 (0) 6128 9757-0 · Telefax +49 (0) 6128 9757-50 · E-Mail: info@wero.de · www.wero.de

NAWA Heilmittel GmbH · Ostendstrasse 100 · D-90482 Nürnberg
 Telefon: +49 (0) 911-544 41-0 · Telefax: +49 (0) 911-544 41-11 · E-Mail: info@nawa.com